NURSICARE®

Pour un allaitement sans douleur



NURSICARE®

Histoires vraies de mamans
pour qui l'allaitement
est un bonheur.

PROFESSIONNEL(LE)S

L'USAGE DE PATCHS THÉRAPEUTIQUES NURSICARE POUR LE TRAITEMENT DES MAMELONS IRRITÉS, CREVASSÉS ET DOULOUREUX CHEZ LES MAMANS ALLAITANTES.

La douleur est une des principales causes d'interruption de l'allaitement maternel. Un traitement inefficace contre la douleur ou l'absence de traitement peuvent affecter la poursuite de l'allaitement maternel.

Les patchs absorbants Nursicare contiennent tous les ingrédients nécessaires pour réduire la douleur et cicatriser rapidement les plaies. Tout en un même patch, sans devoir y ajouter d'autres substances. D'autre part, le patch s'avère utile même quand la maman ressent une douleur sans qu'il n'y ait de plaie ni de friction ou d'égratignure visible.

LES MAMANS DISENT :

Lili Vardi:
"J'ai commencé à utiliser Nursicare une semaine après la naissance de mon fils. Le patch m'a aidée à calmer la douleur des mamelons, mais aussi de toute la zone alentour qui était très sensible et endolorie. En plus les patchs se sont avérés être une protection apaisante contre le frottement des vêtements sur mes seins. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans Nursicare".

Efrat Schwartz:
"Nursicare a sauvé mon allaitement"

- LA SOLUTION QUE LES MAMANS ATTENDENT:

POUR UNE RÉDUCTION IMMÉDIATE DE LA DOULEUR

Les ingrédients actifs exclusifs de Nursicare travaillent conjointement afin de réduire la douleur sur l'aréole et le mamelon, de sorte que la maman ressent rapidement un grand soulagement de la douleur et une sensation de bien-être sur la zone de la blessure.

GUÉRISON RAPIDE

Les patchs absorbants Nursicare favorisent la guérison naturelle et offrent les conditions d'hydratation optimales pour que la peau retrouve sa bonne santé, et ils aident à maintenir les mamelons doux et souples au lieu de secs et fragiles.



FACILES À RETIRER

Les patchs absorbants Nursicare sont confortables et apaisants. Ils ne laissent pas la peau grasse ni collante. Les patchs absorbants Nursicare sont faciles à retirer et n'adhèrent pas à la plaie. Le patch est composé d'une membrane polymérique performante qui ne laisse aucun résidu ni aucune fibre sur la plaie.

PATCH RESPIRANT

Les patchs absorbants Nursicare permettent aux plaies de "respirer". Une membrane semi-perméable à l'extérieur des patchs permet l'échange des gaz et maintient le niveau optimal d'hydratation sur la zone de la crevasse. La membrane aide aussi à éviter la contamination de la plaie et maintient toujours au sec l'extérieur des patchs absorbants.

PROTECTION ET PRÉVENTION


La structure et les ingrédients des patchs absorbants Nursicare protègent le mamelon et évitent qu'il ne s'abîme. Les patchs sont fins, doux et souples et s'adaptent à la structure anatomique de la maman, évitant le frottement entre le mamelon douloureux et les vêtements. Le contenu purificateur de l'intérieur des patchs Nursicare maintient la plaie toujours propre au cours du processus de guérison, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un nettoyage agressif du mamelon blessé. Les fuites de lait sont absorbées et bloquées à l'intérieur de ces patchs, garantissant ainsi une peau propre en permanence.

SÉCURITÉ

Le patch Nursicare a été certifié par la FDA et le CE. Le patch est sûr pour le bébé et la maman et aucun type de réaction allergique n'a été observé.

QUAND ON POSE LES PATCHS ABSORBANTS NURSICARE SUR LES MAMELONS ENDOLORIS,

les ingrédients du patch fonctionnent en totale synergie pour réduire la douleur et l'inflammation et pour favoriser le processus de guérison.

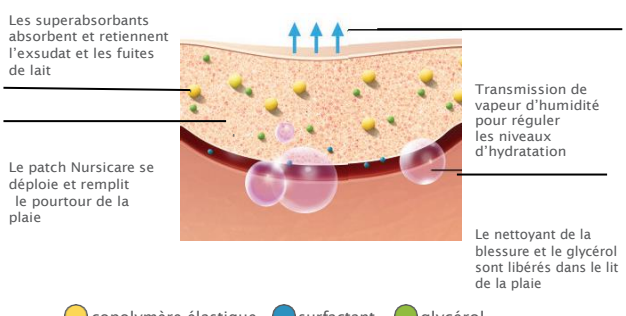


La combinaison de nettoyant, d'hydratant et de superabsorbant crée un environnement d'hydratation optimal pour aider à la guérison des tissus blessés et endoloris.

LE PROCESSUS DE GUÉRISON

- Le patch absorbe le liquide et se déploie délicatement pour établir le contact total avec le lit de la plaie.
- Le nettoyant incorporé aide à maintenir propre le lit de la plaie et élimine les tissus endommagés.
- Le glycérol, l'hydratant de Nursicare, offre un environnement optimal pour traiter les blessures et éviter que les patchs ne collent à la peau
- Les caractéristiques exclusives de PolyMem se combinent pour fabriquer un patch Nursicare non seulement très confortable mais qui aide aussi à réduire l'inflammation et s'attaque ainsi à la douleur persistante ainsi qu'au retrait du pansement de la plaie.
- Le superabsorbant retient le liquide du mamelon et le bloque dans les patchs absorbants Nursicare, aidant ainsi à maintenir le liquide hors du lit de la plaie
- La membrane extérieure contrôle le processus d'évaporation et protège la plaie de toute pénétration ou contamination extérieure.

Application du patch absorbant :

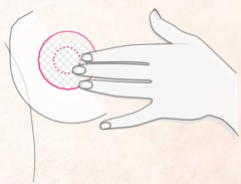

1. Disposer les patchs Nursicare à l'intérieur du soutien-gorge avec la face de l'étiquette vers votre soutien-gorge. Centrer le patch sur la zone du mamelon.

2. Pendant que bébé tète, pour maintenir le patch Nursicare propre, posez-le sur une surface propre avec la face sans texte vers le haut.

Quand faut-il changer le patch absorbant ?

Le patch Nursicare peut être utilisé jusqu'à ce que l'on voit le liquide du patch sur la partie arrière (avec texte). Changer immédiatement le patch s'il est saturé de lait. Les patchs absorbants Nursicare ne sont pas lavables. Le lavage peut éliminer les matériaux et modifier le patch.



Nursicare relativement sec – il n'est pas nécessaire de le changer



Nursicare saturé – il faut le changer

ANNA
CAS 1

Anna est une maman de 30 ans qui s'est présentée en consultation quatre jours après son premier accouchement, avec des plaies douloureuses sur les deux mamelons dues à une mauvaise préhension à l'allaitement. Elle ne pouvait plus donner la tétée alors elle a recouru au tire-lait, ce qui lui a également causé des douleurs intenses dues aux crevasses et à la congestion mammaire dont elle souffrait.
Comme elle ne parvenait pas à tirer la quantité de lait suffisante, elle est passée à l'allaitement mixte. Elle a reçu un traitement uniquement avec Nursicare. La sensation de douleur a notablement diminué en à peine 24h : de 10 sur une échelle de 10 elle est passée à 3 le lendemain. L'utilisation de Nursicare n'a duré que 4 jours, jusqu'à la disparition totale de la douleur.

DÉBUT DU TRAITEMENT AVEC NURSICARE :



Echelle de la douleur - 10

3 JOURS APRÈS



Echelle de la douleur - 3

7 JOURS APRÈS – FIN DU TRAITEMENT



Echelle de la douleur - 0

Photographies aimablement cédées par Gina Weissman, DMD, RN, IBCLC ©

JOHANNA
CAS 2

Johanna, 30 ans, s'est présentée en consultation après la naissance de son deuxième enfant. Elle avait une congestion mammaire, des crevasses et son bébé était ictérique. Johanna supposait que l'allaitement se faisait correctement, mais en réalité il n'y avait pas de transfert effectif de lait (voir photo 1 ci-dessous) dû au frein labial chez le bébé (2e degré) qui s'est réglé par une opération. La douleur que Johanna ressentait, elle la décrivait comme "insupportable" (10 sur une échelle de 10) au début du traitement. Après seulement deux jours d'utilisation de Nursicare la sensation de douleur s'était divisée par dix. Le traitement s'est terminé 3 jours après, sans aucune sensation de douleur.

DÉBUT DU TRAITEMENT AVEC NURSICARE :



Echelle de la douleur - 10

2 JOURS APRÈS



Echelle de la douleur - 1

3 JOURS APRÈS – FIN DU TRAITEMENT



Echelle de la douleur - 0

Photographies aimablement cédées par Gina Weissman, DMD, RN, IBCLC ©

MICHELLE
CAS 3

Michelle est une maman de 34 ans avec des douleurs aiguës sur les deux mamelons et son bébé avec un frein labial. Le problème du frein labial s'est résolu par une petite chirurgie et les crevasses ont été traitées exclusivement avec Nursicare. Au début du traitement, la sensation de douleur était de 8 sur une échelle de 10 puis a baissé à 2 sur 10 après trois jours de traitement. Le traitement a pris fin au bout de cinq jours lorsque les douleurs ont entièrement disparu.

DÉBUT DU TRAITEMENT AVEC NURSICARE :



Echelle de la douleur - 8

3 JOURS APRÈS



Echelle de la douleur - 2

5 JOURS APRÈS – FIN DU TRAITEMENT



Echelle de la douleur - 0

Photographies aimablement cédées par Gina Weissman, DMD, RN, IBCLC ©

KATE
CAS 4

Kate est une maman de 34 ans qui est venue nous voir après son premier accouchement, elle souffrait intensément de crevasses sur les deux mamelons. Kate avait subi une intervention chirurgicale de réduction mammaire et on l'avait informée qu'elle ne pourrait probablement pas allaiter. Elle s'est présentée en consultation cinq jours après l'accouchement. Son bébé avait un frein labial (3e degré) qui a été résolu par une opération. En utilisant Nursicare comme traitement unique pour ses mamelons, elle a constaté une réduction substantielle de la douleur et une amélioration des crevasses en quelques jours, tout en continuant l'allaitement de manière exclusive.

DÉBUT DU TRAITEMENT AVEC NURSICARE :



Echelle de la douleur - 8

3 JOURS APRÈS



Echelle de la douleur - 2

7 JOURS APRÈS – FIN DU TRAITEMENT



Echelle de la douleur - 0

Photographies aimablement cédées par Gina Weissman, DMD, RN, IBCLC ©

QUESTIONS ET RÉPONSES

Nursicare est-il sûr pour les bébés ?

Oui, bien sûr ! Les patchs absorbants Nursicare sont sûrs et leur usage est autorisé par le Ministère de la Santé, la FDA et la CE pour les mamans allaitantes.

Est-il nécessaire de laver les mamelons avant d'allaiter ?

Les autorités sanitaires indiquent qu'il faut retirer toute substance sur les mamelons avant d'allaiter. Comme les patchs absorbants Nursicare n'adhèrent pas, un nettoyage exhaustif n'est pas nécessaire et, par hygiène, il suffit de nettoyer doucement le mamelon avec un peu d'eau.

Est-il possible d'utiliser d'autres substances en association avec Nursicare ?

Les patchs absorbants Nursicare contiennent tous les ingrédients nécessaires à la réduction de la douleur et au soin des plaies, c'est pourquoi il n'est pas besoin d'ajouter d'autres traitements. Les traitements topiques (ex : crèmes, lotions, etc.) ne sont pas recommandés lorsqu'on utilise Nursicare.

Si je ne ressens aucun soulagement de la douleur après 24h, que dois-je faire ?

Les ingrédients de Nursicare sont activés par l'absorption de liquides. Dans le cas où le patch n'absorberait pas le lait maternel et resterait "sec", il est recommandé d'humecter un peu le mamelon avec de l'eau.

Combien de temps dois-je garder le patch sur le mamelon ?

Il est possible d'utiliser le même patch jusqu'à ce que l'auréole d'exsudat de la partie postérieure atteigne le bord, ou sinon jusqu'à cinq jours, tant que le patch reste propre. Ne pas utiliser le patch absorbant s'il est saturé. Les mamans peuvent continuer d'utiliser les patchs absorbants Nursicare tout le temps qu'elles le souhaiteront à condition de bien les changer selon les instructions.

Le patch est très vite saturé de liquide. Que faire ?

Les patchs absorbants Nursicare ont une haute capacité d'absorption et peuvent être utilisés pendant plusieurs jours avant d'être saturés de liquides. Dans la plupart des cas les "fuites" intenses sont des reflux qui se produisent au cours de la tétée. Par conséquent, il est recommandé de retirer les patchs Nursicare des deux côtés au moment de l'allaitement. Cette précaution évitera la saturation de liquide dans les patchs. L'indice de fuite de lait maternel est personnel et varie d'une femme à l'autre.

Où puis-je trouver les patchs Nursicare ?

Nursicare est en vente sur notre boutique en ligne www.nursicare.fr où vous trouverez plus d'information sur le produit.

QU'EST-CE QUE LE POLYMEM ?

PolyMem est un pansement exclusif multifonction conçu spécialement pour aider à réduire la douleur et l'inflammation en même temps qu'il favorise le processus de guérison des plaies.

Les patchs absorbants Nursicare possèdent la même formulation de base que les pansements PolyMem, mais ils ont été améliorés pour les plaies liées à l'allaitement. PolyMem a été utilisé avec succès dans le monde entier pendant plus de 25 ans sur des plaies chroniques et aiguës et pour une large variété de blessures, comme par exemple les brûlures, les escarres, les lésions causées par le diabète, coupures, hématomes, écorchures, etc.

PolyMem et Nursicare sont fabriqués par Ferris Mfg. Corp., siège social à Fort Worth, Texas (USA), et sont distribués en France par Camalia Distribution. Pour plus d'information contactez-nous à contact@nursicare.fr ou par téléphone (WhatsApp) au +33(0)772143671

